

無線震動按摩槍


快速啟動說明



HYPERVOLT


1 對齊電池

將電池的固定卡榫 (A) 與機身上的電池拆卸按鈕 (B) 對齊成一直線後，將電池插入 Hypervolt 的機身。

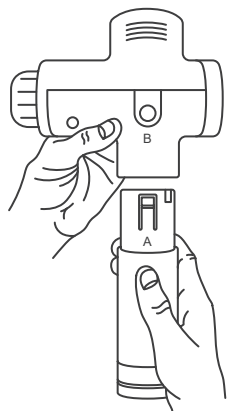


2 確實安裝

將電池插入Hypervolt的機身後，牢牢按在一起，直到聽到設備“咔”一聲。

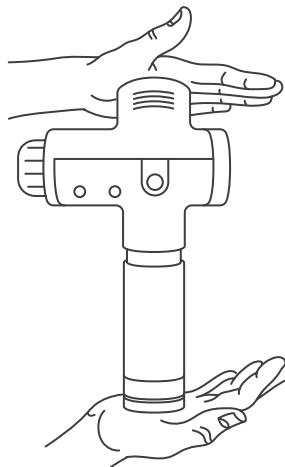


注意：
確保橡膠套滑到
手柄的底部。
下方不應有任何
“間隙”。

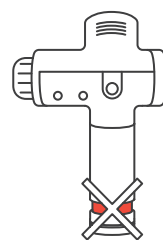

3 插入按摩頭


選擇所需的按摩頭，並直接插入機身前端開口。

注意：
如果使用“叉型”按摩頭，請將按摩頭與凹槽對齊。

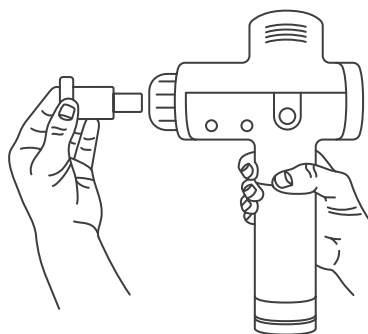

4 通電

將Hypervolt手柄底部的開關切換到ON位置。
一旦Hypervolt通電，紅燈將亮起，指示燈顯示電池電量。

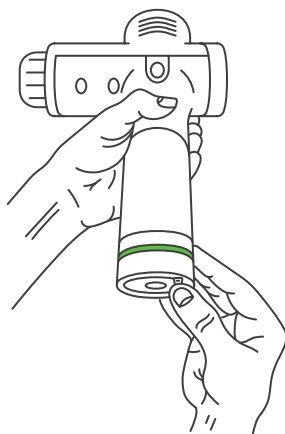


5 選擇你的速度

每個速度級距按一次按鈕，選擇所需的速​​度（1-3）。



6 準備好使用

您現在可以使用Hypervolt了。

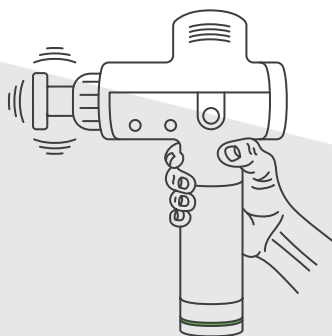

按摩頭

建議使用部位



- 上臂
- 下背
- 手臂/手掌
- 肩膀/肩胛骨



- 胸大肌
- 肩膀/肩胛骨
- 上臂
- 下背
- 手臂/手掌



- 胸大肌
- 肩膀
- 上臂
- 下背

- 手臂/手掌
- 腿部
- 臀部/臀肌



- 脊柱周圍
- 各部位皆適用
- 怕痛等較敏感部位



- 肩膀/肩胛骨
- 上臂
- 脖子
- 臀部/臀肌

Hypervolt無線震動按摩槍 / Hypervolt Plus無線震動按摩槍 為最高科技的無線震動按摩裝置，可針對不同部位沾黏的肌筋膜進行放鬆、增加關節可活動的範圍及喚醒僵硬緊繃的肌肉群！



操作說明 請務必在使用前先閱讀

充電：


- ◎第一次使用前請先充電6個小時，讓電量充滿。
- ◎充電時，請把充電線接到充電埠再插入壁上電源孔。
- ◎不論電池狀態為開啟或關閉，本裝置都能進行充電。
- ◎LED燈亮起顯示電池電量，表示充電中。
- ◎當電量充滿後，LED燈將會全亮。
- ◎本裝置可在任何時間和任何電量狀態下進行充電。
- ◎不建議等到電池耗盡、紅色LED燈亮時再進行充電。
- ◎若震動級速設定在最高級時，平均可運作時間超過2小時，若選擇較低的震動級速則可使用得更久。

操作：

- ◎將電池對齊裝入設備底座，並確實牢固連接在裝置上。
- ◎電源開關在ON位置時，按下電力按鈕一次表示震動級速在強度一，兩次表示強度二，而三次表示強度三。再次按下電力按鈕將關閉裝置。藍色的LED燈則顯示相對的震動級速。
- ◎關閉裝置後，按下裝置側邊卡榫，直接拔出拆卸。

保養，清潔和儲存：


- ◎建議使用微濕的毛巾或軟布擦拭裝置。
- ◎在旅行或存放期間，請將電源關閉，取出電池並存放於盒內。
- ◎保持設備遠離熱源，任何液體和兒童。

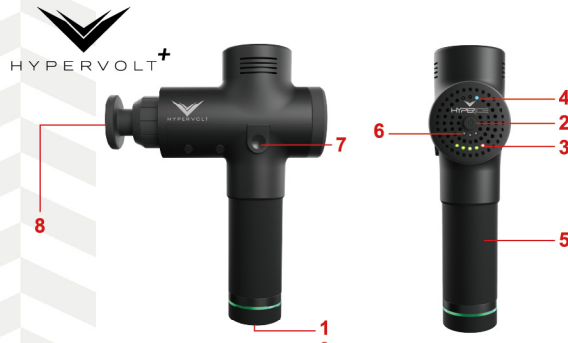

充電：

- ◎ AC充電器：110-240V 50/60Hz - 0.5A - 24VDC-1A
- ◎ 每分鐘震盪次數/Hz：段數1-2000/30Hz，段數2-2600/40Hz，段數3-3200/53Hz
- ◎ 重量：3 lbs/1.3 kg (3.5 lbs/1.6 kg含充電器)
- ◎ 美國設計、中國 / 香港組裝

1. 電池電源鍵
2. 控制器電源鍵
3. 電池電量LED指示燈 (綠，紅)
4. 震幅頻率指示燈
5. 手柄/可拆式電池
6. 壓力感測LED指示燈
7. 電池拆卸按鈕
8. 拆卸式更換鑽頭
9. 充電孔

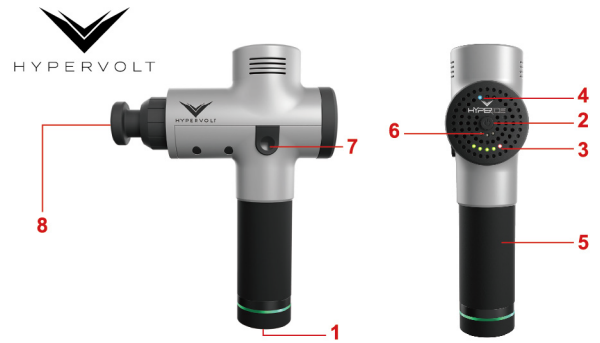

充電：

- ◎ AC充電器：110-240V 50/60Hz - 0.5A - 24VDC-1A
- ◎ 每分鐘震盪次數/Hz：段數1-2000/30Hz，段數2-2600/40Hz，段數3-3200/53Hz
- ◎ 重量：2.5 lbs/1.1kg (3 lbs/1.4kg含充電器)
- ◎ 美國設計、中國 / 香港組裝

警告和注意事項：

- ◎本裝置不可浸在水中；無論是通風口、按鈕或開關都應遠離各種液體。
- ◎請勿擅自拆卸螺釘或拆解本裝置。
- ◎請勿連續使用超過1小時。
- ◎使用充電器之前，請先讓設備休息30分鐘。
- ◎僅限成人使用；若有受傷不建議使用；使用本產品前請先諮詢醫師。
- ◎本裝置僅能使用Hyperice原廠之充電器，且充電電壓應與充電器上指定的範圍一致，使用不正確的電壓充電將可能導致起火或損壞。
- ◎請勿使用延長線或與充電器不相容之電源插座進行充電。
- ◎請勿在洗手台、浴室或其他有水的地方進行充電，且於充電時注意周圍勿堆放雜物。
- ◎請勿一邊充電一邊使用本裝置。
- ◎為保安全，進行充電時人員請勿離開現場。
- ◎本產品使用請僅遵循 hyperice.com.tw 的產品及設備使用說明。

免責聲明：

若有下述情形，請務必於諮詢醫師後再使用：

懷孕、糖尿病合併神經疾病或視網膜受損、穿戴心律調節器、近期內動過手術、癲癇或偏頭痛、椎間盤突出、椎間滑脫、脊椎關節黏連或椎弓解離症、近期內曾置換關節、體內有子宮環、鋼釘或鋼板或其他生理疾病。身體虛弱者及孩童需在有他人陪同的情形下使用任何按摩裝置。

本聲明內容不代表您不能使用按摩裝置，但建議您在使用前先諮詢醫師、專家或者物理治療師並在他們的陪同下進行。

使用前請先閱讀：

- ◎本裝置在乾燥的身體表面上使用，並輕輕按壓移動，每個區域約持續按壓60秒。
- ◎禁止在頭部或任何骨頭的部分使用，若發生疼痛及不適的現象應立即停止。
- ◎裝置啟動時，請勿將手指與頭髮靠近鑽頭及裝置散熱口，避免夾到或頭髮捲入之危險。