

LAICA®

智慧八電極體脂分析計


體脂、體水、肌肉量、基礎代謝率等19項基本身體資料，
46項進階數據及分析評估*

PS7130




PS7130

Fig. 1

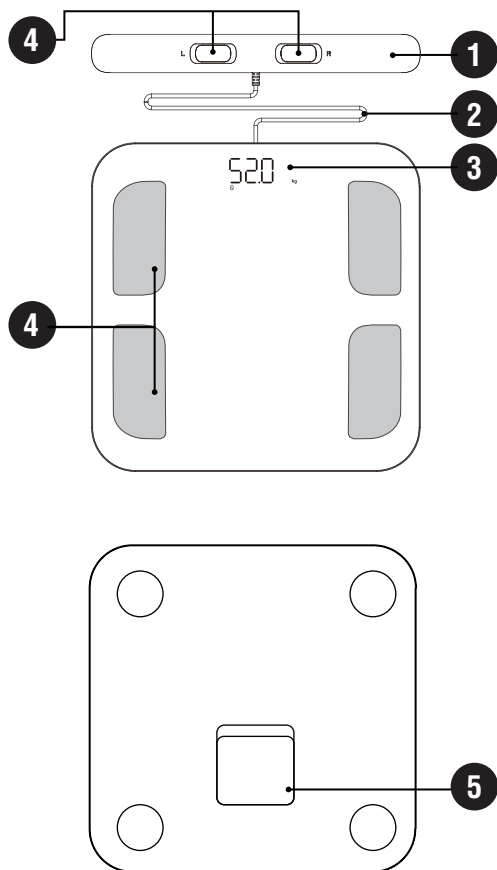

產品描述

1. 測量手柄
2. 手柄連接線
3. 顯示螢幕
4. 測量電極
5. 電池蓋

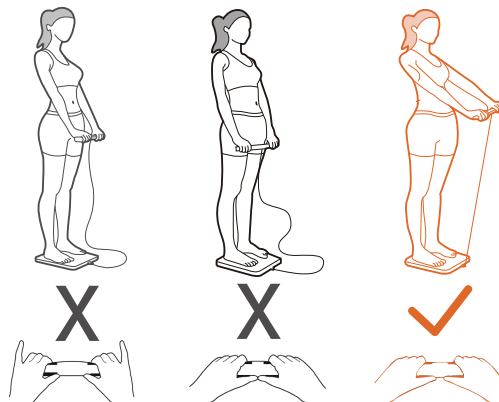

注意事項



*根據APP版本不同，可測量之身體資料及進階數據項目可能略有差異。



請掃描QR-code以註冊保固



年 保固

LAICA International

萊卡環球股份有限公司

231 新北市新店區北新路三段207-1號2樓

客服專線 0800-366-055

www.laica.com.tw

Date - 購買日期

--	--	--	--	--	--	--	--

Retailer's stamp

經銷章



智慧八電極體脂分析計 - 說明與保固

親愛的客戶，感謝您選購本產品，我們將提供您安全可靠的產品，以及完美的使用體驗。

重要

開始使用產品前，請詳細閱讀本說明書。

產品使用說明書視同產品的一部份，請妥善收存；將本產品轉讓予他人時，相關文件亦須一併轉移。

為確保產品的使用安全和被正確使用，請在使用前仔細閱讀本說明書中的說明和警告，並依照正確的維護和使用方法進行操作。

若您遺失本說明書，請透過以下方式聯繫LAICA：

萊卡環球股份有限公司 聯絡地址：231新北市新店區北新路207-1號2樓
客服專線：0800-366-055 官方網站：www.laica.com.tw

八電極體脂分析計能透過生物組抗，測量體內的脂肪、水、肌肉、骨骼等。並可透過藍芽連接專用APP，在智慧型手機上監測數值變化曲線，並生成完整的身體組成分析報告。

目錄

符號	page 3
安全警告	page 3
使用說明	page 4
產品維護	page 4
產品檢驗	page 4
技術規格	page 5
常見問題	page 5
保固政策	page 5

符號



注意事項



禁止事項

安全警告

- 使用前請確認產品之完整性；若有明顯損壞，請勿使用本設備，並聯繫您的零售商。
- 請將塑膠袋放置於遠離兒童處，以避免發生窒息危險。
- 本設備僅適用於預定用途，並根據說明使用。
- 任何其他不正當使用方式所造成之危險或危害，製造商不負擔任何責任。

- 此設備適用於8歲以上人員。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 發生故障或錯誤時，請關閉電源，且勿自行拆解裝置，並聯繫您的零售商進行維修。
- 妥善保存產品，防止意外碰撞、極端溫度變化、灰塵、陽光直曬、並遠離熱源。
- 本產品無防水功能，請避免液體滲入產品內部。
- ⊗ 請勿在相對濕度85%以上的環境操作或儲存本產品。
- ⊗ 注意！玻璃材質容易打滑，請勿在腳上有水時踩上秤面。



注意！使用前注意事項

- 體脂、體水、肌肉量以及其他分析或評估數據僅供參考，如需更多相關訊息，請諮詢您的醫師或營養師。
- 體脂分析計由電極通過您的身體傳送極微量且低強度的電流，對人體不會造成任何危險。
- 不建議以下人員進行量測，精準度可能受影響：
 - 穿戴心律調節器或其他電子醫療設備者
 - 發燒者
 - 12歲以下的兒童
 - 孕婦
 - 接受血液透析(洗腎)者
 - 腿部水腫或骨質疏鬆症者
 - 服用心血管藥物者

電池使用注意事項

- 若預期長時間不使用產品，請取下電池另外保存於陰涼乾燥處。
- ⊗ 若電池非充電電池，請勿為電池充電。
- ⊗ 請勿使用非本說明書描述之電池為產品進行供電。
- ⊗ 切勿將電池暴露於陽光直射或接近熱源。
- 未依照說明指示操作可能會導致電池爆炸或造成其他危險。
- ⊗ 請勿將電池扔進明火。
- 始終由成人進行電池的拆除或更換。
- 使電池遠離兒童：吞嚥電池具有死亡的風險。
- 若不慎吞下電池，請立即與醫生聯繫。
- 電池中包含的酸具有腐蝕性。請避免接觸皮膚、眼睛或服裝。

使用說明

本產品有兩種使用方式：

I. 僅量測體重

II. 透過 Fitdays+™ APP量測體重及身體組成。

I. 僅量測體重：

(不需連線至APP)

1. 將產品放置於平坦堅硬的地面上。
(地毯、地墊或其他柔軟材質，可能會影響測量準確性。)
2. 在螢幕熄滅後，踩上秤面並將體重平均分散在雙腳，產品將自動開始測量；測量完成時，螢幕上的讀數將會快速閃爍三次並鎖定。
(測量時請勿倚靠任何物體，並避免移動及晃動。)
3. 離開秤面，體重讀數將會持續顯示數秒後自動關機。

II. 透過 Fitdays+™ APP量測體重及身體組成：

(需連線至APP)

體脂分析計與 Fitdays+™ APP配對成功後，即可在APP內查看所有量測數據。

如何與智慧型手機進行配對：

進行操作時請將手機靠近體脂分析計，以保持連線。

適用設備：

- iOS 8.0及以上
- Android™版本5.0及以上



1. 在智慧型手機上開啟藍牙功能。
 2. 掃描右側的QR Code，或從App Store或Play Store™下載FITDAYS+™ APP。
 3. 啟動FITDAYS+™ APP。
 4. 按照APP中的說明創建新帳戶，並與LAICA 智慧體脂分析計配對。
- 若成功配對，將在APP中看到重量測量頁面。




若無法正確使用APP進行測量，請進行以下操作配對設備：
在APP中，點選下方「設備」頁面，您應該會看到「LAICA PS7130」的設備。
如果沒有，請點選「添加設備」以新增設備。
踩一下秤面，並點選「體脂秤」→「搜索藍牙配對」。
如果成功搜尋到體脂分析計，APP內將跳出通知，點擊「連接」後將顯示「已配對」。

為了確保數據的準確性，請正確填寫您的基本資料(身高、生日、性別)。

如何進行測量：

1. 啟動FITDAYS+™ APP。
2. 登入您的帳戶，選擇「設備」頁面，選擇使用的設備。
3. 赤腳踩上秤面，注意將腳底正確的放置在電極上，並握住測量手柄(如右圖，或第1頁的圖片)。
4. 待測量完成後，您將可以在FITDAYS+™ APP中找到您的身體數據。

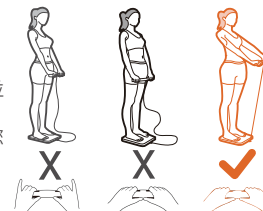

產品維護

電池更換

當螢幕顯示「LO」或電池符號時，即需更換電池。

1. 將電池蓋往上推開。
2. 卸下電量不足的電池。
3. 根據極性裝入新電池。
4. 關閉電池蓋。

維護保養

- 將產品儲藏在乾燥陰涼處。
- 將產品水平放置。
- 使用柔軟的乾布擦拭本產品。
- 請勿使用化學或研磨性的清潔產品。

產品檢驗

CE 本產品適用於一般家庭
本產品通過CE 2014/30/Eu 電磁兼容指令，並在特定範圍內通過CE 2014/35/Eu 低電壓指令檢查，以確保在當前技術知識狀態下，不會干擾周圍其他設備。若設備出現異常情況，請勿使用，必要時請直接與製造商聯繫。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

技術規格

- 最大重量: 180 kg / 400 lb
- 最小刻度: 100 g / 0.2 lb
- 1.5V AAA 碳鋅電池 x4
- LED 顯示螢幕
- 工作頻率: 2402-2480 MHz, 有效幅射功率: <0.9 dBm
- 操作環境: +10°C +40°C; RH≤85%
- 儲存環境: +10°C +50°C; RH≤85%

常見問題

狀況	可能原因	解決方式
體脂分析計無法啟動	未正確上秤	雙腳平行踩上體脂分析計 注意! 踩上體脂分析計後它才會自動開機
	電池電量不足	更換電池
螢幕顯示"Lo"或電池符號	電池電量不足	更換電池
螢幕顯示"Err"	體重超過最大秤重上限	本產品最大秤重上限為180公斤
Fitdays+™ APP 無法顯示數據	裝置尚未連線至APP	根據"如何與智慧型手機進行配對"章節進行操作
	測量期間手機進入鎖定狀態	請在測量期間保持手機解鎖
Fitdays+™ APP 僅顯示體重	未正確踩住/握住電極片	如第1頁圖示: 赤腳踩住體脂分析計上的電極片, 並赤手正確抓握測量手柄
	與電極片接觸處皮膚過於乾燥	令接觸處的皮膚略為濕潤 (可用水稍微打濕、或使用乳液等)

所有量測數值皆四捨五入到最低位數, 準確性為量測重量之正負1%+1個最小刻度

保固政策

本產品自購買之日起保固1年, 請小心保存有零售商蓋章之保固卡及購買憑證。

本產品適用於一般家庭, 如需商用產品請洽經銷商。

保固範圍僅包含製造缺陷, 若由於意外、不正確使用、人為疏失等不屬於保固範圍。

使用非LAICA提供之其他附件或是任意修改、拆解產品, 可能會使保固失效。

保固條款不適用於電池或會磨損的部件及消耗品。

保固期間內更換、維修保固條款內之產品將不收取任何費用, 超出保固時間外則需收取技術費用。

製造商不承擔因不依循說明手冊中規範而造成的任何損失或損害責任, 特別是有關安裝、使用、維護。

萊卡致力於不斷改善產品, 萊卡有權力改變後續產品生產規格及要求。

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



LAICA[®]

智慧
八電極體脂分析計

PS7130

LC180/TW - 05/2025

☞ CCAJ25LP4190T1

iOS, iPhone, iPad mini, iPod touch, App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries - Android™, Play Store™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc.

LAICA[®]

LAICA Taiwan

萊卡環球股份有限公司

231 新北市新店區北新路三段207-1號2樓

客服專線 0800-366-055

Made in China

www.laica.com.tw